


# Kallassy Sprunggelenkbandage

Hoher Komfort bei optimaler Stützwirkung



## Indikationen

- Konservative Behandlung von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen
- Funktionelle Nachbehandlung von Bandoperationen
- Prophylaxe bei chronischer Bandinstabilität während sportlicher Betätigung

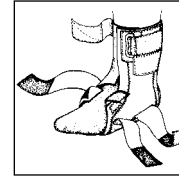

Bei der Entwicklung der Kallassy-Bandage hat man die Vorteile des traditionellen Tapens mit der einfachen Handhabung moderner Knöchelorthesen verbunden.

Durch die Verstärkungsbänder werden die Supination und Inversion gezielt ausgeschaltet, wobei die funktionelle Plantar- und Dorsalflexion jedoch weitgehend erhalten bleibt. Als Nebeneffekt wird dabei das Längsgewölbe unterstützt.

Durch Verzicht auf harte Konstruktionselemente und aufgrund der geringen Materialstärke ist die Kallassy-Bandage fast in jedem Schuh zu tragen – ein Vorteil, der sie besonders im sportlichen Bereich zum Einsatz kommen lässt. Verbessert wird der Sitz der Bandage durch das direkte Tragen auf der Haut.

Bei Innenbandverletzungen kann die Bandage auf der Gegenseite eingesetzt werden.

## HMV Nr. 23.02.02.3002

Größe	Schuhgröße	rechts	links
XXS	- 35	<b>02 K 009</b>	<b>02 K 010</b>
XS	35 - 39	<b>02 K 001</b>	<b>02 K 002</b>
S/M	39 - 44	<b>02 K 003</b>	<b>02 K 004</b>
L/XL	44 - 48	<b>02 K 005</b>	<b>02 K 006</b>
2XL	48 - 52	<b>02 K 007</b>	<b>02 K 008</b>
3XL	52 -	<b>02 K 011</b>	<b>02 K 012</b>

