

ErixTwo Schulterorthese

Die patentierte Schulterorthese zur wirksamen Stabilisierung



Die ErixTwo Schulterorthese wurde zur Stabilisierung des Schultergelenks entwickelt. Die Kombination aus stabilisierendem NeoTex Material und halbelastischem Gurtsystem ermöglicht eine optimale vordere und hintere Stabilisierung des Schultergelenks bis 90° Armabduktion.


Die Orthese lässt sich im Oberarmbereich durch 3 Klettbänder individuell einstellen. Ein ventraler und dorsaler Gurt dienen der Bewegungslimitierung. Der vertikal-lateral verlaufende Gurt ermöglicht ein zusätzliches Anheben des Oberarms.

Eingearbeitete Silikonstreifen fördern die Kraftübertragung der Orthese auf die Haut, so dass eine Steigerung der Propriozeption und des Bio-Feedbacks erreicht wird.

Die Orthese ist in 5 Größen erhältlich.

Indikationen

- Schulterluxationen
- Verletzungen der Rotatormanschette und des AC-Gelenks
- Allgemeine Schulterinstabilitäten

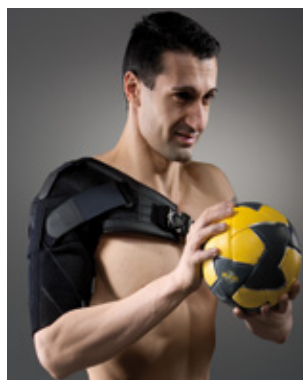

HMV Nr. 23.09.03.0006

Größe	Umfang Mitte Oberarm	rechts	links
XS	24 - 28	01 ET 01	01 ET 02
S	28 - 32	01 ET 03	01 ET 04
M	32 - 35	01 ET 05	01 ET 06
L	35 - 38	01 ET 07	01 ET 08
XL	38 - 42	01 ET 09	01 ET 10

Alle Maße in cm

