

1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 29515/2013/1 - TB36
--	---

3 Antragsteller (Name und Anschrift) DE3345750 / 0000 NeaTec Vertriebsgesellschaft für orthopädische Erzeugnisse mbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) DE3345750 / 0000 NeaTec Vertriebsgesellschaft für orthopädische Erzeugnisse mbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm
--	---

Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2013/09/20
	6 Datum und Nummer des Antrags 2013/05/28 -
	7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1010 00 1 Umsatzsteuersatz: 7%

8 Warenbeschreibung

Rückenorthese, sog. DiskDr Double Extensionsorthese, Art.-Nr. 50 WG 0x, in acht Größen erhältlich, in Form einer Wareneinzelverpackung in Aufmachung für den Einzelverkauf, im Wesentlichen bestehend aus

- einer mit vertikalen, aufblasbaren Luftröhren versehenen, unelastischen Bandage (charakterbestimmender Bestandteil im Hinblick auf die Verwendung), innen mit einem Baumwollfutter und außen mit einer glatten, mit Polyurethan bezogenen Oberfläche, außen mit einem Luftventil und einem unelastischen Gurt mit Doppel-Klettverschluss versehen, mit einer dorsalen Höhe von ca. 13 cm (im nicht gefüllten Zustand) und ca. 20,5 cm (mit Luft). Das Luftventil lässt sich durch Drehung öffnen und schließen. Die Luftröhren verlängern sich beim Einpumpen der Luft so, dass die Wirbelsäule im LWS Bereich extendiert wird und die gesamte Bandage eine sehr hohe Festigkeit mit stabiler Struktur erhält. Die Bandscheiben, Zwischenwirbelgelenke und die belasteten Nerven werden entlastet und die Schmerzen sollen reduziert werden. Der Bandscheibenabstand am 4. und 5. Segment der LWS wird um durchschnittlich 3 mm erweitert. Die Streckung der Lendenwirbelsäule entlastet den Zwischenwirbelbereich, was zu einer schnellen und effektiven Schmerzlinderung führt soll;
- einer Handluftpumpe mit über Kabel angeschlossenem Manometer und einer zangenartigen Klemme zur Verbindung mit dem Luftventil.

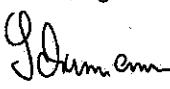
Äußere Form siehe Abbildungen in der Anlage


Die Orthese wird prä- und postoperativ zum Stützen und Halten (Stabilisierung, Entlastung und Schmerzreduktion) des betroffenen Wirbelsäulensegments u. a. bei Lumbalsyndrom, Bandscheibendegeneration, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthese, Spondylolyse, chronischen Schmerzen, Spinalkanalstenose und schmerzhafter Altersskoliose eingesetzt. Die Bestandteile sind gemeinsam mit einer Gebrauchsanweisung in einem Karton verpackt.

Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereicht.

9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	vertrauliche Daten
---	--------------------

11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:

Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Kataloge	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	Muster / Proben	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstiges	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort	Berlin	Unterschrift	Im Auftrag						
Datum	20. September 2013		 (Schumann)						



64 Seite 1 von 3