


1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 1247/2009/1 - TB33
3 Antragsteller (Name und Anschrift) 3345750 Nea Tec GmbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) 3345750 Nea Tec GmbH Dieselstr. 6 89231 Neu-Ulm
Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2009/07/03
	6 Datum und Nummer des Antrags 2009/02/28
	7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1010 00 1 Umsatzsteuersatz: 7%
8 Warenbeschreibung Orthopädische Vorrichtung für Menschen, sog. Sprunggelenkbandage, in Form eines dreilagigen Flächenerzeugnisses aus zwei Außenlagen aus Spinnstoffgewirken und einer Zwischenlage aus Neopren, durch Nähen konfektioniert, mit runder Fersenöffnung. Die Vorrichtung wird mit einem die Fußfessel umgebenden Klettzügel, einem Klettverschlussband über dem Spann, zwei vertikal an der Knöchelaußenseite verlaufenden Klettbändern, sowie einem spiralförmig von der Fußsohle über Fußrücken und Knöchel verlaufenden textilen Band an Fuß und Knöchel fixiert (äußere Form siehe Abbildung, Ausführungen für links und rechts und in 6 verschiedenen Größen). Die Orthese wird zum Stützen und Halten des Sprunggelenks bei chronischen Außenbandinstabilitäten, nach Verletzungen (Bandläsion) oder nach Operationen (Außenband) verwendet. Die Stützung erfolgt über die nicht elastischen 5 cm breiten Fixierungsbänder. Die Supination (Umknicken nach außen) wird verhindert, während Beugung und Streckung des Fußes teilweise erhalten bleiben. Die Ware ist mit einer Bedienungsanleitung in einem bedruckten Karton verpackt.	
9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben Kallassy	vertrauliche Daten
10 Begründung der Einreihung Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6 / Anm 6 Abs 1 2. Anstrich Kap 90	
11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt: Beschreibung <input checked="" type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	
Ort Berlin	Unterschrift Im Auftrag
Datum 03. Juli 2009	 (Schumann)

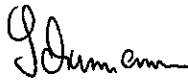